




Visión artificial para el análisis seminal

Sistema portátil y preciso para evaluar la calidad seminal del macho reproductor.

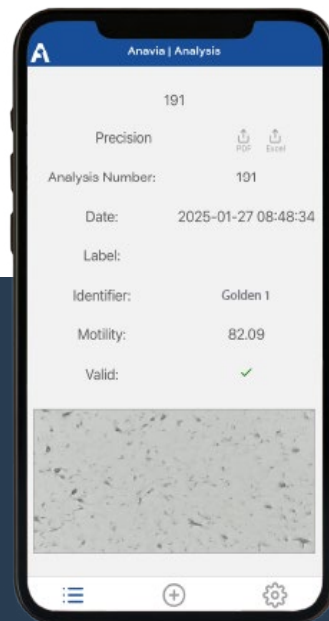

Precisión

Análisis preciso y objetivo de:

- ✓ Concentración.
- ✓ Motilidad total.
- ✓ Motilidad progresiva.

Rapidez

- ✓ Resultados inmediatos.
- ✓ Agiliza la evaluación seminal.
- ✓ Facilita la toma de decisiones clave.

Conectividad

- ✓ Conexión en tiempo real por Bluetooth.
- ✓ En cualquier dispositivo.
- ✓ Conserva vídeos y exporta resultados.

¿Qué es Anavia?

Es un **dispositivo portátil** para evaluar las dosis antes de la inseminación y así **mejorar la tasa de éxito** de la inseminación. Cuenta con un **sistema de calefacción** para la correcta manipulación de las muestras.

Con **conectividad Bluetooth**, Anavia se controla con una aplicación móvil que incorpora un **algoritmo de análisis de alta precisión**, lo que proporciona **resultados rápidos y precisos** de la calidad seminal. Finalmente, permite **exportar los informes** de cada análisis en formato PDF o Excel desde tu smartphone.



Visión artificial para el análisis seminal

Portátil y ligero

Su diseño compacto y liviano para los profesionales que requieran movilidad sin sacrificar la calidad de los resultados.


Enchufable, sin baterías

Anavia funciona conectado a la red eléctrica con un único cable. Sin dependencia de baterías para estar siempre operativo.

Datos precisos, conectividad total y control térmico integrado

Calefactado

Gradilla y platina calefactadas.

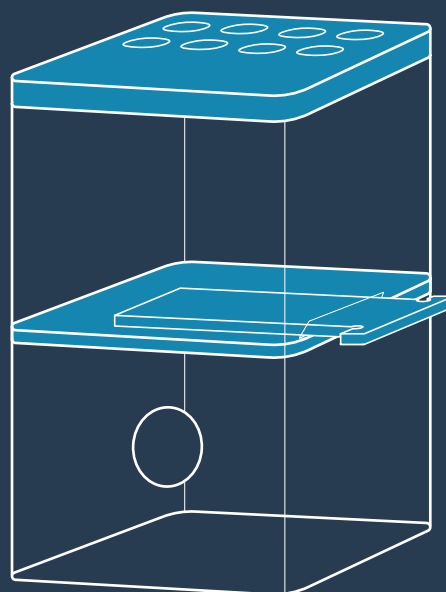

¿Cómo se usa?



Inicia sesión en la aplicación

Descarga la APP e ingresa tus credenciales.



Enciende el dispositivo

Conéctalo, presiona el botón y espera a que la luz se ponga verde y conéctate a través de Bluetooth.



Prepara la muestra

Carga la muestra atemperada en la cámara de recuento.



Analiza

Inicia el análisis y espera los resultados en la aplicación.



Genera informes

Visualiza los resultados y exporta los informes en PDF o Excel.